

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

bea@nt-rt.ru || <https://bionet.nt-rt.ru/>

Двойной газовый модуль для VM3Vet Pro , VM5Vet Pro , VM7Vet Pro.

Руководство по эксплуатации

QUICK GUIDE AND SPECIFICATIONS

1 DUAL GAS MODULE

Dual Gas sidestream module is intended for monitoring of intubated and ventilated or non-ventilated small and large patients under anesthesia. The Dual Gas module is a multi-gas analyzer measuring carbon dioxide (CO₂) and one of five anesthetic agents with manual selection of the specific agent type. This is intended for use only with the BM3Vet Touch, BM7Vet, and BM Pro Series (BM3Vet Pro / BM5Vet Pro / BM7Vet Pro).



2 INSTALLATION OF THE WATER TRAP TANK




QUICK GUIDE AND SPECIFICATIONS

3 INSTALLATION OF SAMPLE LINE AND AIRWAY ADAPTER



4 MOUNTING DUAL GAS MODULE


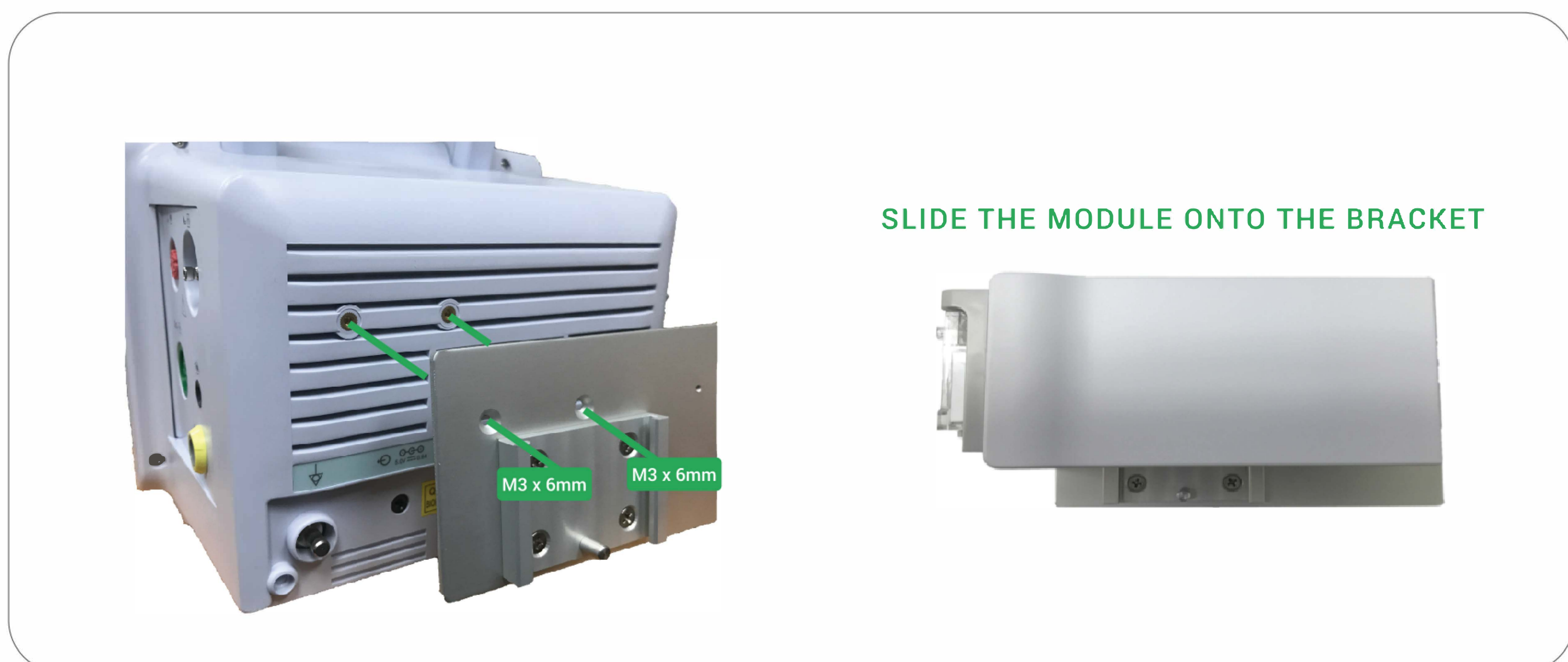


QUICK GUIDE AND SPECIFICATIONS

5 CONNECTING THE MODULE TO THE DEVICE

The Dual Gas module will be automatically detected when it is connected to BM3Vet Touch, BM7Vet, or BM Pro Series (BM3Vet Pro / BM5Vet Pro / BM7Vet Pro).

****Please refer to the operation manual of BM3Vet Touch, BM7Vet, or BM Pro Series for details of the Dual Gas module operation.*

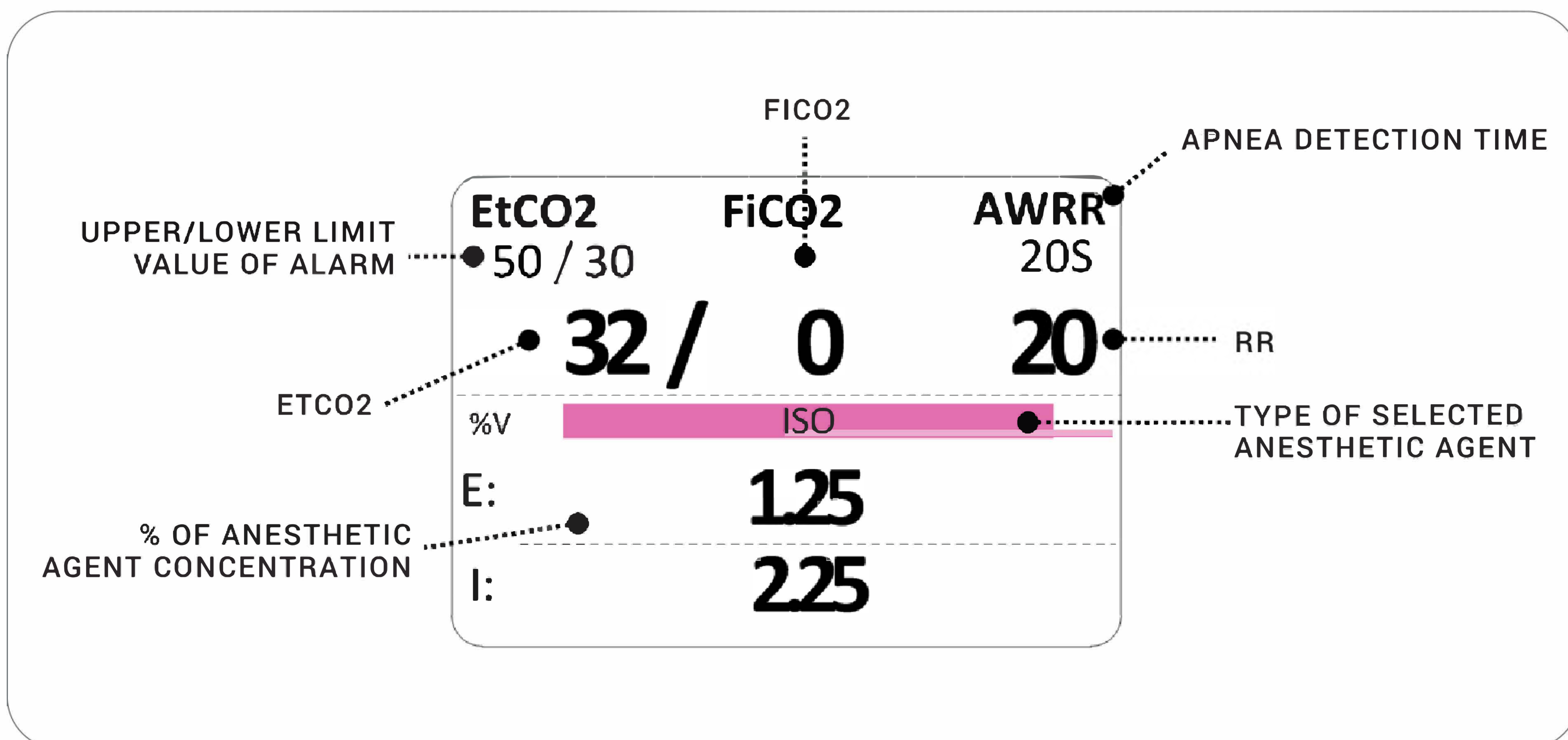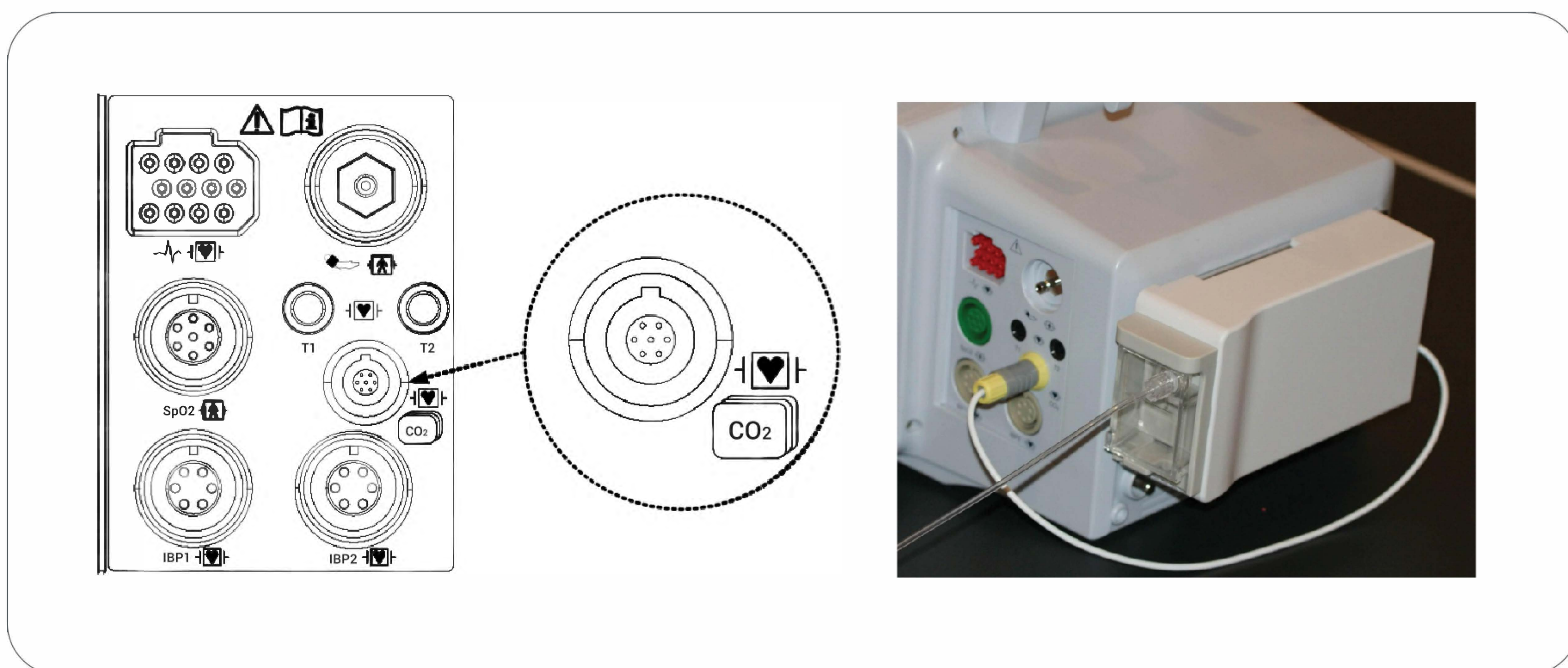

QUICK GUIDE AND SPECIFICATIONS

5 SPECIFICATIONS

CO ₂	Range:	0 – 100 mmHg; 0 – 13.3 kPa; 0-10% CO ₂ STPD (standard temperature and pressure dry)
	Accuracy:	± (0.2 vol% + 4% relative)
	Rise Time:	400 ms (average)
Anesthetic Agents	Gases:	Isoflurane, Enflurane, Halothane, Desflurane, Sevoflurane
	Range: Iso., Enf., Hal., Sevo	0 – 6%
	Range: Desflurane	0 – 18%
	Resolution	0 .01%
	Accuracy	± (0.15% vol% + 4% relative)
	Rise Time	450 ms (average)
Calibration		Factory calibrated
Power Up Time		30 sec
Delay Time		< 4sec
Dimensions	L x W x H	175mm x 50mm x 85mm
Power	Sensor only (not including sampling pump)	12V 0.15A
Respiration	Range: Accuracy:	0-100 breaths/min ±1 breath/min
Flow Rate		Range and accuracy 170 ml/min ±20ml/min (TBD)
Environment Condition	Operating Temperature: Storage Temperature: Ambient Humidity: Ambient Pressure:	15 – 35°C -5 to 50°C 15-95% RH 70kPa to 106kPa (525mmHg to 795mmHg)
Weight		Approx. 400g
Water Removal System		Water trap tank
Sampling Line		Anesthetic gas tolerant standard sample line
Application	Veterinary use only	Species: Canine, Feline, Equine

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

bea@nt-rt.ru || <https://bionet.nt-rt.ru/>